

採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、採取容器を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成27年3月31日(火)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

7

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検 査 項 目		新	現	備考		
84 208	5556 5C111	癌胎児性フィブロネクチン	容器 番号 「60」			測定委託先における変更のため。 (現試薬販売中止による後継新試薬および新採取容器への変更。)		
				保管方法	室温		保管方法	室温
				有効期間	1年		有効期間	1年

※裏面にも案内がございますので、ご覧ください。


ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■ 相関

		現試薬	
		陰性	陽性
新試薬	陰性	28	2
	陽性	1	23
一致率		94.4% (n=54)	

■ 検体採取の留意点

【検体の抽出・濾過方法】

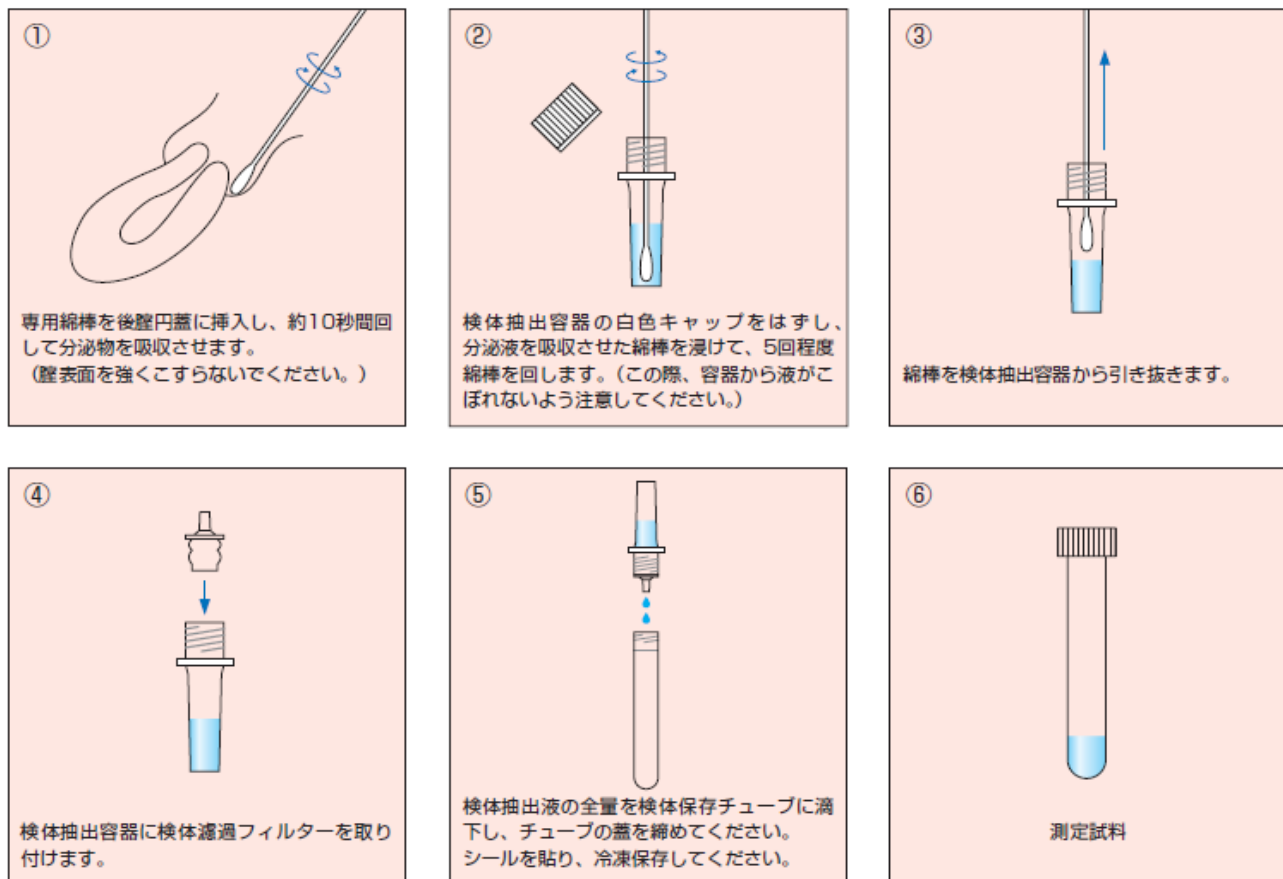

※注意事項

- ・必ず専用の採取器具を用い、抽出・濾過検体にてご提出ください。
- ・3月31日以降、現行容器で採取された検体での受託はできません。
- ・検体の採取は膺洗浄前に行ってください。
- ・検体中に精液が混入しているときは、その検体は使用しないでください。
- ・検体中に0.1%以上の血液混入が認められた場合、正確な結果が得られない可能性があります。